

MODE D'EMPLOI

COMMENT PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON ?

Lisez tout d'abord la lettre, le dépliant et cette notice explicative avant de prélever un échantillon de vos selles.

Nous vous demandons de prélever un échantillon de vos selles à l'aide du kit prélèvement ci-joint. Découvrez comment prélever un échantillon ci-après ou visionnez la vidéo sur www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/onderzoek. Veuillez à garder le kit prélèvement hors de la portée des enfants.



Étape 1 : Veuillez tout d'abord uriner et tirez la chasse. Vos selles ne peuvent entrer en contact avec vos urines. Prenez le test et le papier biodégradable. C'est le papier blanc avec les dessins verts.



Étape 2 : Posez le papier biodégradable dans la toilette sur l'eau, avec les dessins en haut.




Étape 3 : Le papier permet de recueillir vos selles. Prenez immédiatement votre échantillon.



Sortez la petite bouteille du sachet vert. Ne sortez pas le tissu rectangulaire. Tournez le bouchon vert et ouvrez la petite bouteille. Le bouchon vert est doté d'un bâtonnet avec des stries. Ne jetez pas le liquide de la petite bouteille. Par ailleurs, n'ajoutez aucun liquide


Étape 4 : Frottez légèrement les stries sur la surface de vos selles jusqu'à ce que des selles s'attachent aux stries. Une petite quantité de selles suffit.

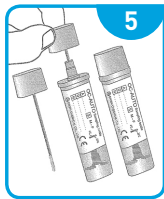


Étape 5 : Remettez le bâtonnet dans la petite bouteille. Poussez jusqu'à entendre un « clic ».

Attention : n'écrivez pas sur la petite bouteille.

Attention : n'ouvrez plus la petite bouteille après y avoir remis le bâtonnet.

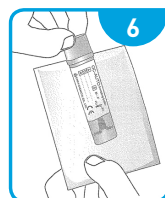


Étape 6 : Replacez la petite bouteille dans le sachet vert. Refermez le sachet. Ne sortez pas le tissu rectangulaire.

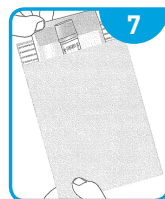

Étape 7 : Complétez le formulaire de réponse. Placez le sachet vert avec votre échantillon de selles et le formulaire de réponse dans l'enveloppe à bulles avec l'adresse du laboratoire. Renvoyez l'enveloppe. N'oubliez pas d'ajouter sur le formulaire de réponse la date à laquelle vous avez prélevé l'échantillon. Sans formulaire de réponse dûment rempli, nous ne pouvons pas analyser votre échantillon.

Attention: ce formulaire de réponse sera traité automatiquement.

- Ce formulaire doit être utilisé uniquement par la personne dont le nom est imprimé sur le formulaire de réponse.
- Ne collez rien sur le formulaire de réponse.
- Utilisez uniquement un stylo bleu ou noir.
- Écrivez chaque lettre et chiffre dans la case, ne touchez pas le bord.
- Spécifiez les données d'un médecin avec une adresse en Belgique.

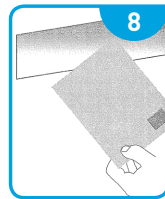

Step 8 : Renvoyez l'enveloppe à bulles dans les plus brefs délais. Il est inutile d'affranchir. Vous n'êtes pas en mesure d'envoyer immédiatement votre échantillon ? Vous pouvez conserver la bouteille dans le réfrigérateur pendant sept jours au maximum.